



Stabilisation



Hauteur réglable



soutien lombaire


- Coussin dossier de positionnement avec coque très rigide et retours latéraux de 17 cm pour un maintien adapté à des utilisateurs avec forte déviance latérale ou/et ne disposant pas d'aucun tonus musculaire pour se maintenir dans une position droite qui conditionne une bonne distribution des appuis
- Forme anatomique prononcée au niveau des lombaire et doté d'une courroie lombaire interne réglable en hauteur par velcro pour compléter idéalement les possibilités de réglages déjà existants
- Utilisation de fibre polyuréthane souple pour une excellente capacité d'absorption des gibbosités et un confort d'assise unique
- La combinaison du dossier Superstabil avec le dossier réglable en tension permet un maintien efficace et confortable. En réglant la tension des sangles du dossier, les retours du coussin permettent de maintenir l'utilisateur latéralement afin de préserver une position droite. La distribution des pressions au niveau de l'assise est ainsi optimisée
- Le réglage de la tension permet également une adaptation de la forme anatomique du dossier à la courbure dorsale de l'utilisateur pour empêcher par exemple le glissement avant de l'utilisateur
- Coussin compatible avec tous les modèles (sauf Netti 4u CE)
- Hauteur du coussin réglable par velcro
- Existe en hauteur 48 cm ou hauteur 60 cm
- Revêtement tissu Mars respirant pour une ventilation de la zone de contact déhoussable et lavable en machine
- Revêtement déhoussable Climatherm disponible pour une ventilation optimale de la zone de contact et une régulation de température garantie autour de 28°. Idéal en cas d'appui prolongé.
- Disponible dans un grand choix de largeurs (de 35 à 60 cm) en hauteur de dossier 48 cm et 60 cm
- Coussin pouvant être complété d'autres composants de positionnement pour des besoins plus spécifiques (cales thoraciques, courroies lombaires, etc..)

Dimensions dossier SUPERSTABIL hauteur 48 cm:

Référence	Largeur cm	Hauteur cm
3834835	35	48
3834840	38/40	48
3834845	43/45	38
3834850	50	48
3834855	55	48
3834860	60	48

Dimensions dossier SUPERSTABIL hauteur 60 cm:

Référence	Largeur cm	Hauteur cm
3836035	35	48
3836040	38/40	48
3836045	43/45	38
3836050	50	48
3836055	55	48
3836060	60	48

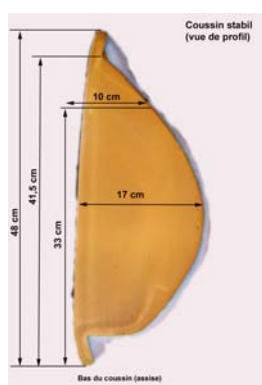

Dimensions coussin  
SUPERSTABIL  
Hauteur 48 cm



Extension pour  
dossier hauteur 60 cm



Cale thoracique pour  
rigidifier davantage  
les retours latéraux  
(voir fiche maintien du  
buste)

Pour toute demande d'information :  
Tél.: 04-50-27-37-63  
infos@eurekamedical.fr