



Stabilisation



Hauteur réglable



soutien lombaire


- Coussin dossier de positionnement avec coque plus rigide et retours latéraux de 17 cm pour un maintien adapté à des utilisateurs avec déviance latérale ou/et ne disposant pas d'un tonus suffisant pour se maintenir
- Utilisation de fibre polyuréthane souple pour une excellente capacité d'absorption des gibbosités et un confort d'assise unique
- Forme anatomique plus prononcée au niveau des lombaires
- La combinaison du dossier Stabil avec le dossier réglable en tension permet un maintien efficace et confortable. En réglant la tension des sangles du dossier, les retours du coussin permettent de maintenir l'utilisateur latéralement afin de préserver une position droite. La distribution des pressions au niveau de l'assise est ainsi optimisée
- Le réglage de la tension permet également une adaptation de la forme anatomique du dossier à la courbure dorsale de l'utilisateur pour empêcher par exemple le glissement avant de l'utilisateur
- Coussin compatible avec tous les modèles (sauf Netti 4u CE)
- Hauteur du coussin réglable par velcro
- Existe en hauteur 48 cm ou hauteur 60 cm
- Revêtement tissu Mars respirant pour une ventilation de la zone de contact déhoussable et lavable en machine
- Revêtement déhoussable Climatherm disponible pour une ventilation optimale de la zone de contact et une régulation de température garantie autour de 28°. Idéal en cas d'appui prolongé.
- Disponible dans un grand choix de largeurs (de 35 à 60 cm) en hauteur de dossier 48 cm et 60 cm
- Coussin pouvant être complété d'autres composants de positionnement pour des besoins plus spécifiques (cales thoraciques, courroies lombaires, etc..)

Dimensions dossier STABIL hauteur 48 cm:

Référence	Largeur cm	Hauteur cm
4320	35	48
4321	38/40	48
4322	43/45	38
4323	50	48
4324	55	48
4325	60	48

Dimensions dossier STABIL hauteur 60 cm:

Référence	Largeur cm	Hauteur cm
4320	35	48
4321	38/40	48
4322	43/45	38
4323	50	48
4324	55	48
4325	60	48

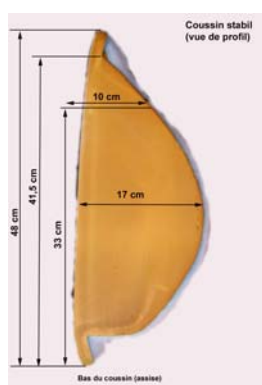

Dimensions coussin
STABIL
Hauteur 48 cm



Extension pour
dossier hauteur 60 cm



Cale thoracique pour
rigidifier davantage
les retours latéraux
(voir fiche maintien du
buste)

Pour toute demande d'information :
Tél.: 04-50-27-37-63
infos@eurekamedical.fr