



Fabrication unique pour une répartition optimale des zones de pression critiques




Mousse PU texturé et stabilisant pour une distribution optimale des pressions

Insert gel KLEGEL au niveau des ischions pour absorber les chocs tout en répartissant les pressions

Mousse PU formée répartit les pressions des ischions

Mousse PU à faible densité pour augmenter le volume de répartition des pressions et éviter le glisser avant

Coque VBASE 88 rigide, amortit les chocs et stabilise les couches de mousse supérieures

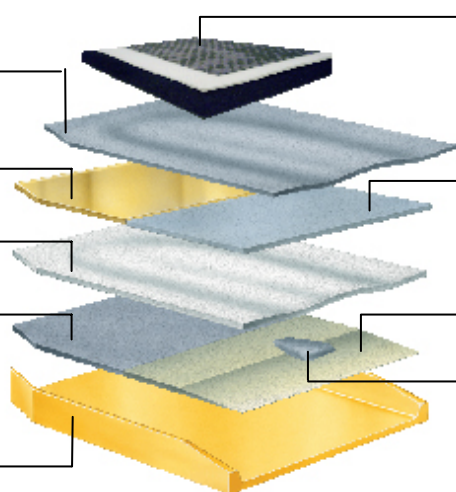


Revêtement Climatherm respirant et régulateur de

Mousse PU améliore la répartition des pressions sous les cuisses

Mousse PU densité moyenne soulage la pression et réagit comme une abduction et légèrement biseauté vers

Butée triangulaire pour éviter le contact des adducteurs

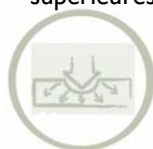

Distribution des pressions



Prêt à l'emploi



Régulation température



Ventilation optimale

**Toujours prêt à l'emploi !**

- Coussin d'assise de grand confort et de prévention d'escarres pour « risques élevés »
- Coussin muni d'une coque en Polyuréthane en partie inférieure et sur les côtés pour stabiliser l'utilisateur dans son Fauteuil
- Forme anatomique optimisée pour une bonne répartition des pressions tout en préservant une certaine liberté de mouvement
- Coque PU en dessous de forme concave pour le ROYAL PLUS adaptée aux Fauteuils pliables à croisillon, afin de compenser les toiles d'assise détendues
- Utilisation de mousse de plus forte densité à l'avant qu'à l'arrière pour stabiliser le pelvis et empêcher le « glisser avant »
- Insert gel au niveau de la partie ischiatique et mousse à mémoire de forme en partie supérieure, disposée entre deux couches de mousse pour préserver la ventilation
- Revêtement Decutex incontinence déhoussable et respirant sous le revêtement Climatherm
- Revêtement déhoussable Climatherm pour une ventilation optimale de la zone de contact et une régulation de température garantie autour de 28°
- Disponible dans un grand choix de largeurs (de 25 à 60 cm) et de profondeur d'assise (de 30 à 55 cm)
- Coussin autoclavable à 105 ° et lavage du revêtement en machine à 60°

Tailles disponibles (Fabrication de tailles plus importantes ou différentes possibles, nous consulter) :

Référence	Largeur	Profondeur	Épaisseur à l'avant	Épaisseur à l'arrière	Poids (kg)
3332530	25	30	7	7	1
3333030	30	30	7	7	2
3333035	30	35	7	7	2
3333535	35	35	7	7	2
3333540	35	40	7	7	2
3333545	35	45	7	7	2
3333550	35	50	7	7	2
3333840	38	40	7	7	2
3333845	38	45	7	7	2
3333850	38	50	7	7	2
3334040	40	40	7	7	2
3334045	40	45	7	7	2
3334050	40	50	7	7	2
3334055	40	55	7	7	2
3334340	43	40	7	7	2
3334345	43	45	7	7	2
3334350	43	50	7	7	3
3334555	43	55	7	7	3
3334540	45	40	7	7	2
3334545	45	45	7	7	2
3334550	45	50	7	7	3
3334555	45	55	7	7	3
3335040	50	40	7	7	2
3335045	50	45	7	7	3
3335050	50	50	7	7	3
3335055	50	55	7	7	3
3335545	55	45	7	7	3
3335550	55	50	7	7	3
3335555	55	55	7	7	3
3336045	60	45	7	7	3
3336050	60	50	7	7	3
3336055	60	55	7	7	3

Pour toute demande d'information :  
 Tél.: 04-50-27-37-63  
[infos@eurekamedical.fr](mailto:infos@eurekamedical.fr)